
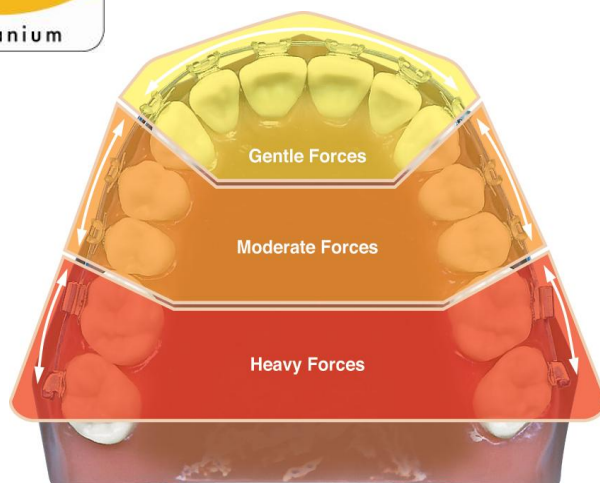


Název produktu: Oblouky TriTanium


- ▶ Termoaktivní NiTi oblouky se třemi progresivně rostoucími silami – zajišťují větší účinnost pohybu zubů od frontálního po distální úsek
- ▶ Biologicky kompatibilní síly umožňují prodloužit intervaly návštěv, snížení počtu výměn oblouků a vyšší komfort pro pacienta
- ▶ Frontální úsek vykazuje jemnou termoaktivní sílu podobnou obloukům Therma-Ti Lite™ - pro pohodlný pohyb řezáků a špičáků
- ▶ Pro střední úsek je charakteristická střední termoaktivní síla podobná obloukům Therma-Ti™ - pro docílení optimálního pohybu premolárů
- ▶ V distálním úseku oblouk vykazuje silnou termoaktivní sílu podobnou obloukům Therma-Ti "D"™ - pro snadný pohyb silně kotvených molárů
- ▶ Při výrobě jsou elektrolyticky leštěné oblouky charakterizovány bodovými tranzitními zónami, které vylučují existenci mrtvých zón na oblouku
- ▶ Prodávají se ve tvaru Form I a Form III, balení 10 ks
- ▶ Cena: 1.295,- Kč

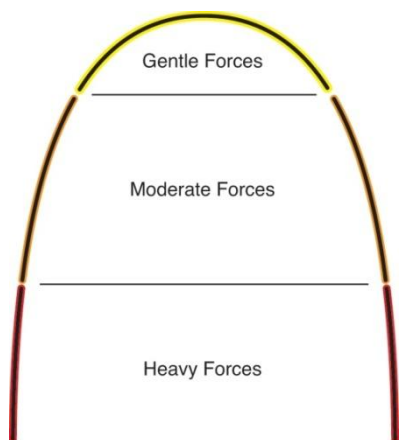


Zaváděcí akce:

1.015,- Kč/bal. 10 ks

Tvary:

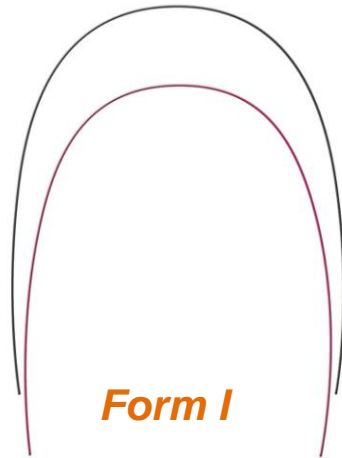

Form I

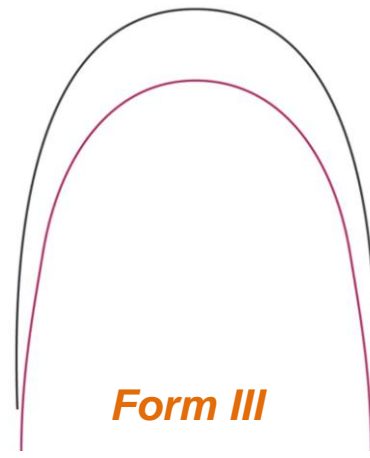

Form III

TriTanium Arch Wire

<u>Dimension</u>	<u>Form I</u>	<u>Form III</u>
Upper Arch:		
.016 x .016	859-540	859-731I
.016 x .022	859-541	859-732I
.017 x .025	859-537	859-733I
.018 x .018	859-545	859-734I
.018 x .025	859-542	859-735I
.019 x .025	859-543	859-736I
.020 x .020	859-544	859-737I
Lower Arch:		
.016 x .016	859-550	859-741I
.016 x .022	859-551	859-742I
.017 x .025	859-547	859-743I
.018 x .018	859-555	859-744I
.018 x .025	859-552	859-745I
.019 x .025	859-553	859-746I
.020 x .020	859-554	859-747I

To Receive TriTanium in individual packs, place a "W" at the end of the part number above