

Kroužky



- **Vlastnosti**
- **Maximum Retention molárové kroužky**
 - **Master Series (MR1)**
 - **Mini Master Series (MR2)**
- **Standard Molar Bands**
- **Premolárové kroužky**


Vlastnosti molárových kroužků

Optimální kontury, tvrdost normální, medium a vysoká

Velký počet velikostí s ideálními rozestupy pro snadné umístění

Permanentní laserové značení

Více druhů kroužků: Maximum Retention (MR1 & MR2) Master Series & Mini Master Series


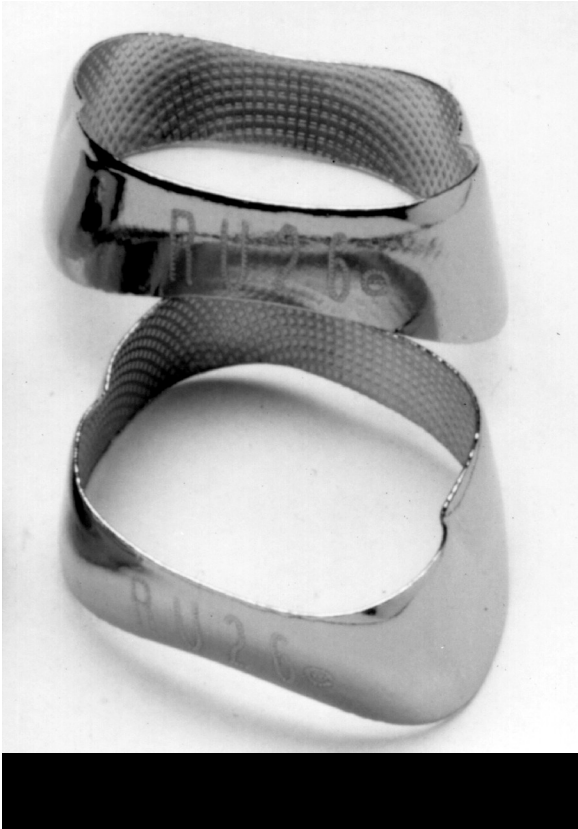


Maximum Retention kroužky

Laserem leptané kapsičky nabízí
mechanickou retenci; (cca .001 inch
hluboké)

O 42% navýšena plocha povrchu
oproti standardním kroužkům

Unikátní geometrický tvar zatékavých
kapsiček navyšuje kvalitu lepení po
celém obvodě kroužku

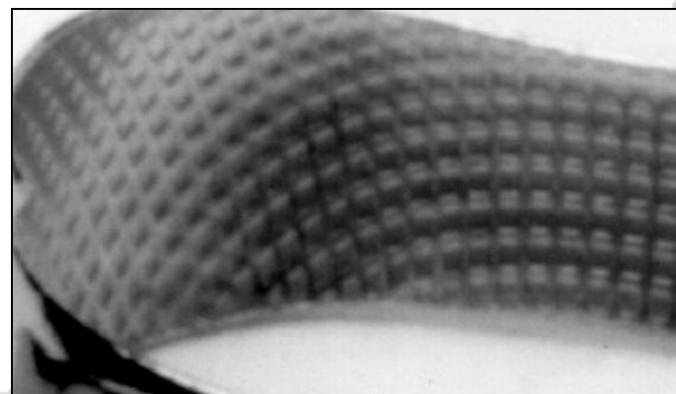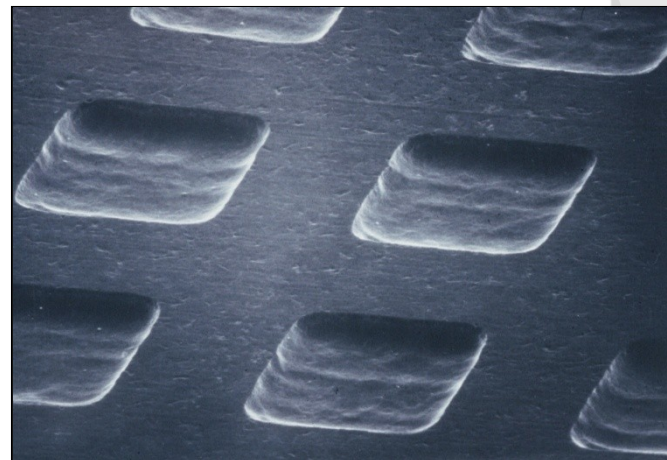

Master Series Maximum Retention Bands (MR1)

Laserem leptané kapsičky navyšují povrch a pomáhají zlepšit mechanickou retenci


Anatomicky konturovány, snadno adaptabilní na moláry

Plné bukální a lingvální krytí s redukovanými aproximálními stranami

Tvrdoost Medium (síla stěny .007 inch)



Mini Master Series (MR2) Maximum Retention Band

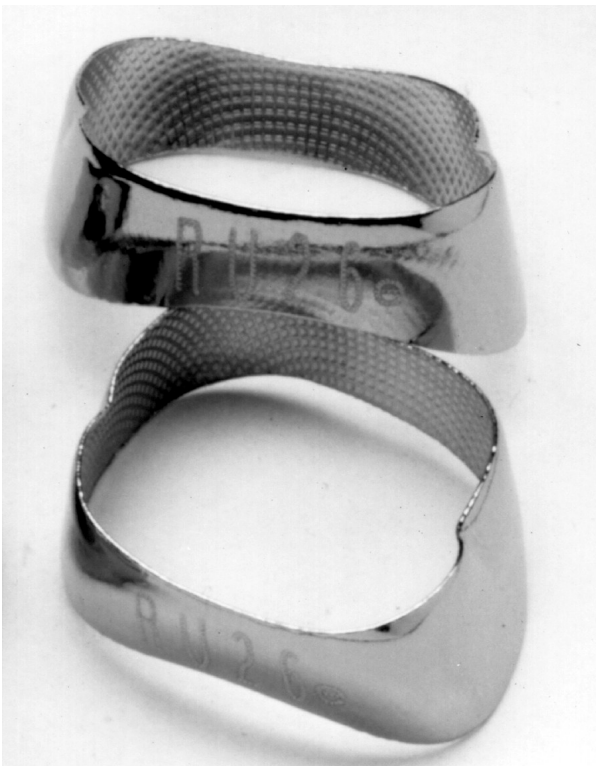

Velikost 1 - 32

Laserem leptané kapsičky navyšují povrch a pomáhají tak lepší mechanické retenci

Menší bukální a lingvální výška pro snadné umístění na částečně erudované moláry

Redukované aproximální strany pro snadnější umístění a ochranu tkáně

Vysoce anatomické

Tvrdoost Medium (síla stěny .006)

Master Series Standard Bands



Anatomicky konturované, snadno adaptabilní
na pacientovy moláry

Plné bukální a lingvální krytí s
redukovanými aproximálními stranami

Matching 2nd molar bands available

Tvrdost Medium nebo Hard (síla stěny .007
inch)

Mini Master Series Standard Band



Nižší bukální a lingvální výška pro snadné usazení na částečně erudované moláry

Redukované aproximální strany pro snadnější umístění a ochranu tkáně

Vysoce anatomické

Zvláštní pozornost věnována anatomii 2. moláru

Tvrдост Regular (síla stěny .006 inch)

Premolárové kroužky



Unikátní design zaručí výtečné usazení od bukální po lingvální oblast přičemž pevně svírají cervikální okraj

Optimální tvrdost usnadňuje přesné usazení

Univerzální tvar pro 1. a 2. pravé/levé moláry

Tvrdost Regular , síla stěny .005 inch

... další možnosti kroužků



Micro kroužky na první moláry – pro menší rozměry trvalých 1. molárů, 10 velikostí

Špičákové kroužky



Laterální řezákové kroužky



Centrální řezákové kroužky



Kroužky na dolní přední řezáky



Rollo™ Band

- ⊙ **Jako kroužek** – 10 velikostí na každý kvadrant v obvyklých korunkových tvarech, okluzální výřez pro snadné sejmutí a snadnou polymeraci cementu
- ⊙ **Jako korunka** – okluzální zahnutí dodává celému kroužku integritu a pevnost, tloušťka .007 zajišťuje pevné kotevní síly.

Zvláštnosti konfigurací Rollo™ Band:



univerzální
oříšek



univ. oříšek
s háčkem



válcový
oříšek



válcový oříšek
s kanylou 3,2 mm
.018



válcový oříšek
s kanylou 3,2
mm .022